

Fiche technique	A-17 PLUS	A-22 PLUS	A-28 PLUS
Tension d'alimentation	220/240V 50Hz 220/230V 60Hz		
Puissance nominale	2300 W		
Dimensions externes L x H x P	480 x 500 x 600 mm		
Dimensions de la chambre DIA x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Poids total	51 kg	52 kg	53 kg
Capacité du réservoir	4,5 litres		
Autonomie (avec eau au niveau max)	De 7 à 11 cycles	De 6 à 10 cycles	De 5 à 9 cycles

CYCLE	Type de cycle	Temps de stérilisation	A-17 PLUS	A-22 PLUS	A-28 PLUS	Séchage*
		(min.)	Temps du cycle incluant le temps de stérilisation, déduction faite du temps de séchage (min)			
134 °C UNIVERSEL	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSEL	B	20	45	48	52	13-17
134 °C VELOCE	S	4	20	23	26	1
134 °C SOLIDES EMBALLÉS	S	4	20	24	28	13-17
134 °C PRION	B	18	43	45	53	13-17
xxx °C CUSTOM	S	Cycle pouvant être personnalisé par l'utilisateur avec des températures de 134 °C / 121 °C, temps du processus à partir de 4 min (134 °C) ou 20 min (121 °C) et séchage programmable				
TEST VIDE		TEST	18	18	19	
TEST HELIX/B&D		TEST	20	24	28	
TEST DE VIDE + TEST HELIX/B&D (effectués en séquence)		TEST	42	46	51	

* Le séchage varie en fonction du modèle et du volume de la machine
Note : les temps ne prennent pas en considération le temps de préchauffage maximum (10 min).
Note : les temps peuvent varier en fonction de la charge et de l'alimentation électrique.
Note : les temps des modèles à 120V peuvent augmenter jusqu'à un maximum de 20 %



BU Medical Equipment

Sede legale ed amministrativa
Headquarters

Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

Stabilimento
Plant

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601



Les caractéristiques techniques mentionnées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, dans le cadre d'une mise à jour technique constante. Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones situées en dehors de l'UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et des spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur de votre zone.

A PLUS.

AUTOCLAVES ANTHOS A PLUS

- A-17 PLUS
- A-22 PLUS
- A-28 PLUS



UNE INNOVATION CONSISTANTE



De l'eau du réseau, rien d'autre

FILTRATION INTÉGRÉE AVEC GROUPE AUTONOME

Comment ça fonctionne ?

Contrairement aux autoclaves traditionnels, A Plus ne nécessite pas de raccordement hydrique externe pour le traitement de l'eau du réseau. Grâce au filtre de déminéralisation logé dans le réservoir principal, l'utilisateur peut le remplir avec de la simple eau du robinet. Cela permet l'optimisation et la rationalisation des espaces et des processus, aboutissant à des économies importantes. Le système de filtration de A Plus garantit une simplicité opérationnelle sans précédent.

Efficacité et économies

Ce stérilisateur vous offre des performances très élevées tout en maintenant les coûts d'utilisation à un niveau extrêmement bas. Du jamais vu ! L'utilisateur n'aura plus besoin de s'approvisionner en eau déminéralisée, le filtre de A Plus se chargeant de la déminéralisation. Il lui suffira de remplir le réservoir de la machine avec de l'eau du robinet. Dorénavant, vous ne devrez plus vous préoccuper du stockage des bidons ni de la détérioration des composants internes de la machine due à une mauvaise qualité de l'eau.



ÉCRAN LCD.

A Plus est le stérilisateur intelligent, un outil de travail indispensable garantissant des performances excellentes, grâce aussi à l'écran LCD tactile couleur doté d'une interface utilisateur simple et intuitive. Chaque contrôle est représenté par des icônes permettant de vérifier immédiatement l'état de la machine.




Di.V.A.

Di.V.A. est l'acronyme de "Digital Virtual Assistant" ou assistant virtuel numérique. Le premier système de contrôle et traçabilité des appareils de stérilisation sur Cloud. Une fois sauvegardées, les données seront à la disposition des opérateurs en accédant à la page web dédiée.



Assistance technique à distance avec Easy Check.

Tous les autoclaves de la gamme A Plus sont dotés de Wifi intégré et port Ethernet. Une fois connectés à internet et après l'activation du service Easy Check, ils bénéficient d'une assistance à distance. Les temps d'intervention se réduisent considérablement, ce qui permet au technicien de maintenir constamment les machines au maximum de leurs performances.

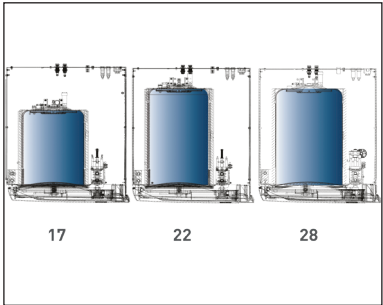

Une seule taille pour 3 volumes.

La gamme A Plus est disponible dans les volumes 17, 22 et 28 litres. Trois capacités différentes pour permettre à l'utilisateur de choisir la machine correspondant le mieux à ses besoins. Les dimensions externes, identiques pour les trois machines, permettent une installation aisée. Les modèles 17 et 22 litres disposent de cinq plateaux, un plateau supplémentaire soit six pour la version 28 litres.



Logiciel de traçabilité.

MyTrace est le logiciel de traçabilité disponible pour A Plus. En utilisant ce programme, il est possible d'associer le jeu d'instruments stérilisés au patient grâce à un code-barres. Un moyen irremplaçable pour compléter le processus de stérilisation et assurer la protection juridique du dentiste.



Imprimante.

Pour compléter la gamme A Plus, une imprimante externe, en mesure de fournir les rapports ou les étiquettes avec codes-barres, est disponible comme accessoire en option.